DETECTOR Digital de Alcohol

AlcoHAW# Slim

Resultados **Rápidos**

Fácil de usar

FDA 510(k)

Cumple con las normas DOT/NHSTA para analizadores




Pantalla de dos dígitos

Diseño de boquilla para varios usuarios





prueba a varios usuarios.

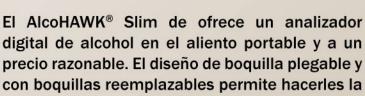

AlcoHAWK® Slim contiene in sensor semi-conductor de alto grado que verifica rápidamente la presencia del alcohol.



El diseño elegante del AlcoHAWK® Slim es una excelente selección para uso personal.



DETECTO Digital de Alcohol

AlcoHAMA Slim

El AlcoHAWK® Slim es un alcoholímetro que verifica rápidamente la presencia del alcohol. El AlcoHAWK® Slim es compacto, ligero y ofrece un diseño novedoso de boquilla plegable. AlcoHAWK® Slim trae incluido una tecnología de reconocimiento de sensor (Sensor Recognition Technology™) que controla ciertos tipos de condiciones anormales del sensor. Ha pasado la notificación pre-publicitaria del FDA 510(k) y cumple con las especificaciones para los modelos de verificadores de alcohol en el requeridos DOT/NHTSA (Departamento aliento por el Transporte/Administración Nacional de Seguridad Vial).

Características

Simple y fácil de usar

Ligero y compacto

Diseño de boquilla plegable

Incluye tres boquillas reemplazables

Pantalla LED de dos dígitos

Indica que está listo para usarse con un tono

Indica con un tono cuando se ha obtenido la muestra

Sensor de semiconductor óxido

Sensor de presión eléctrica para mejorar la calidad de la captura del aliento

Especificaciones

Dimensiones 5 x 1.75 x .75 pulgadas

Peso 0.3 libras

Plástico moldeado resistente a golpes Rango de detección Presentación

Fuente de energía 2 baterías AA Vida de la batería 150 pruebas1

Sensor Sensor sensible semiconductor

Tiempo de soplar 5 segundos

Tiempo de respuesta 5 segundos1

Pantalla digital Temperatura para operar

Muestra de aire Calibración

Operación

Garantía limitada Precisión

2 dígitos (.00% CAS) 10-40°C (50-104°F)

.00% - .40% CAS

5 segundos

Requerida periodicamente³

Un botón Un año

± 0.01% a 0.02% CAS2

CAS = Cantidad de alcohol en la sangre

© 2010 Q3 Innovations. Todos los derechos reservados.



¹ Son estimaciones, los resultados pueden variar

² Lea el manual del usuario antes de usar y siga cuidadosamente las instrucciones.

³ Visítenos en www.q3i.com